

Công ty TNHH TM & DV Mắt Kính Hàn Việt

Trụ sở chính: 736D, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Văn phòng đại diện: 25/7/1A Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 028.6296.1888 Hotline: 090.2222.979 Email: ctyhanviet@gmail.com

KR-1

Auto Kerato-Refractometer



PERFORMANCE
YOU CAN COUNT ON

 **TOPCON**

Sự tiên lợi và tính mỹ thuật đều có trong **KR-1**





Tính năng đặc trưng của dòng KR - 1



KR-1 Với hệ thống tự động mới nhất, người sử dụng dễ dàng khám chỉ với 1 lần chạm.

Tự động hoàn toàn chỉ cần 1 lần chạm vào màn hình điều khiển

Hệ thống vận hành đơn giản và nhanh



Khởi động

Mắt phải



Tự động di chuyển


Mắt trái



Ra phiếu dữ liệu


Để sử dụng với màn hình màu điều khiển

Tất cả những thông tin vận hành đều nằm trên bảng điều khiển. Các nút điều khiển hỗ trợ tất cả các công việc vận hành, hệ thống tự động giúp đo mắt phải và trái 1 cách nhanh chóng

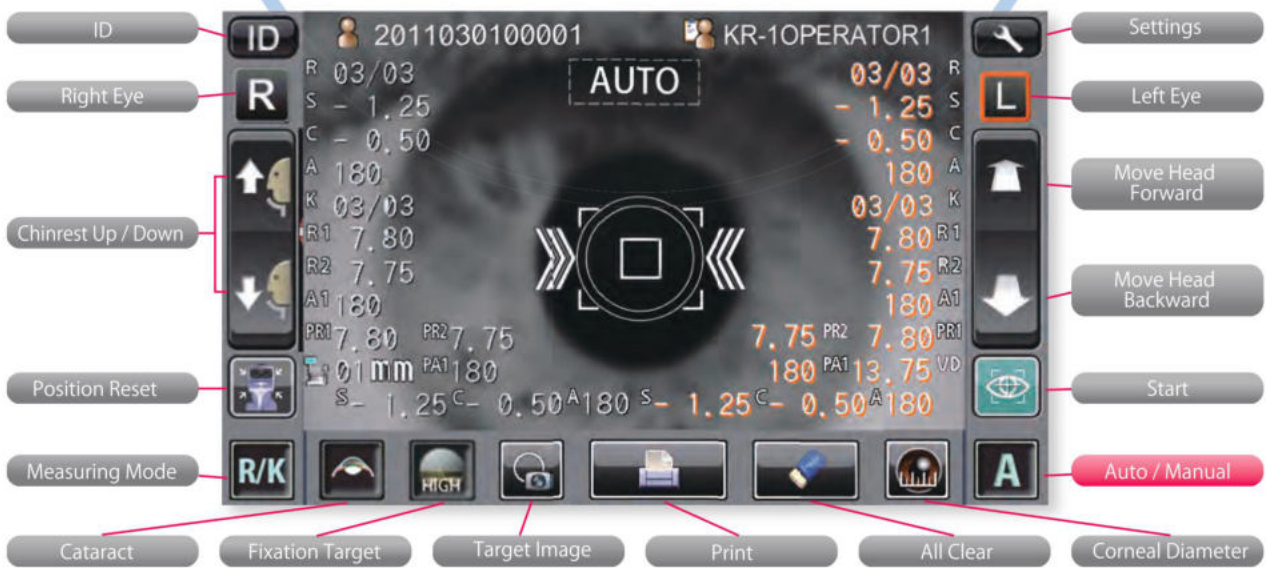


Chế độ vận hành tay **M**

Chế độ vận hành bằng tay đơn giản, dễ sử dụng.

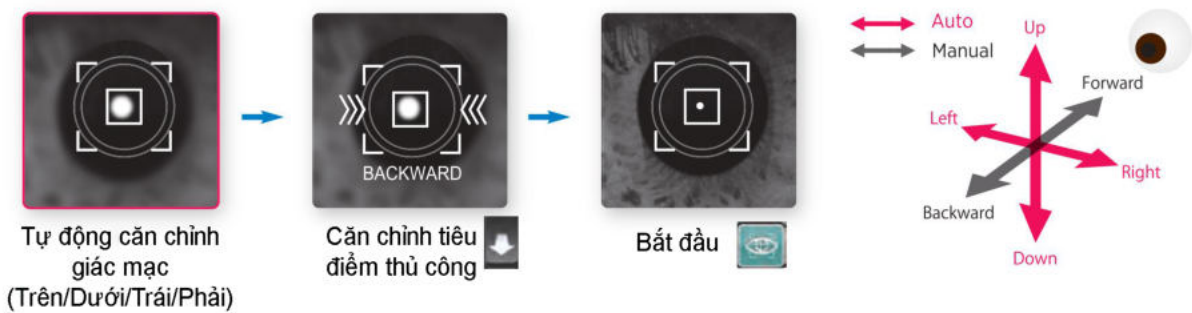

The difference between the pupil center and the corneal apex, allows the KR-1 to easily take measurements.

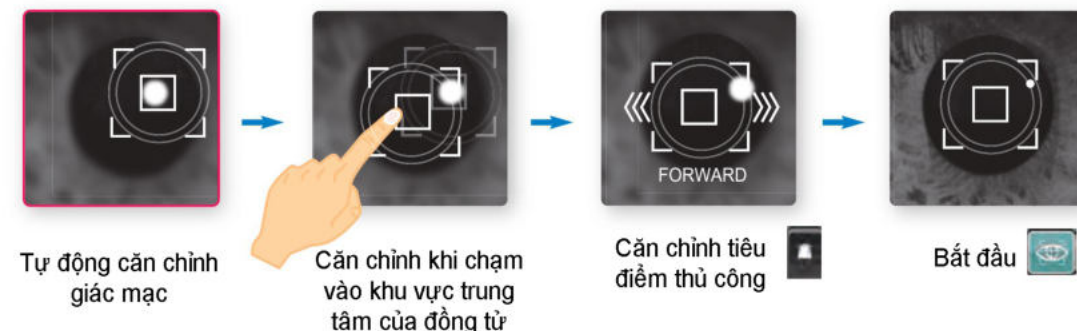



NEW style
Hỗ trợ người khám

Side Position



NEW style
Giúp mở mi mắt

Rear Position

Bố trí linh hoạt và tiết kiệm diện tích

Bảng điều khiển có thể điều chỉnh cho phép người vận hành được định vị ở bất cứ đâu xung quanh người khám vì bảng điều khiển có thể được xoay mặt theo nhiều hướng khác nhau. Thân máy nhỏ gọn cho phép người vận hành dễ dàng hỗ trợ người khám từ nhiều vị trí khác nhau trong quá trình đo đạc cả khi cần mở mí mắt của người khám. Đây là tính năng ưu việt nhất tiết kiệm được không gian và diện tích phòng khám.

Minh họa khi ngồi khám



Front Position (Seated)

Minh họa khi đứng khám




Front Position (Standing)


Thiết kế khung đo kiểu mới

Máy đo KR-1 với kết cấu khung đo kiểu mới với góc nghiêng xuống 5° giúp cho người khám cảm thấy thoải mái hơn khi tựa đầu vào khi đo mắt

Thiết kế tựa đầu khi đo mắt


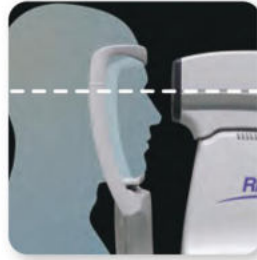


Máy Topcon thông thường

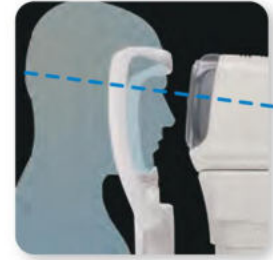

Máy KR-1

Kết cấu thân máy

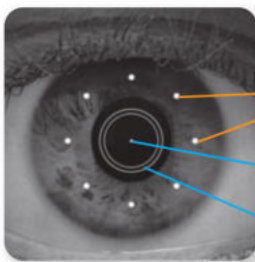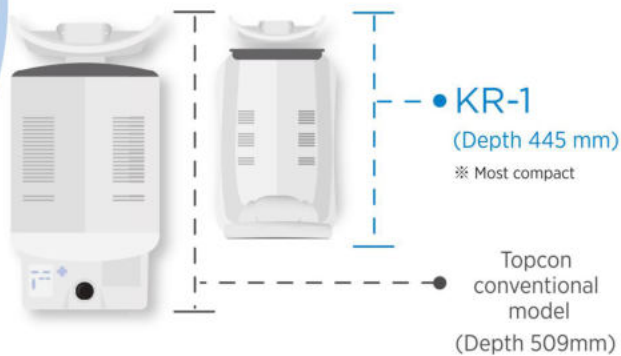

Màn hình đo lường

Peripheral Points

Đỉnh giác mạc

KRT Ring


Đo lường chuẩn xác

Đo biên độ KRT

Máy đo KR-1 cho phép đo độ cong của giác mạc, với vòng đo KRT bên trong, rất hữu ích trong việc đánh giá giác mạc để đeo kính áp tròng.

Hệ thống đo lăng kính quay


Với công nghệ lăng kính quay độc quyền của Topcon, Máy đo thị lực KR-1 cung cấp số đo chính xác và độ tin cậy cao nhất. Thiết kế đo quang học hiện đại được tích hợp vào KR-1 để cho ra số liệu chuẩn xác với đường kính con ngươi tối thiểu là 2mm

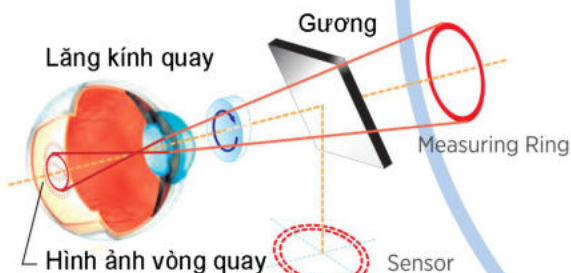

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOPCON KR-1

Đo Khúc Xạ	Điện khúc xạ hình cầu: -25D đến 22 D (0.12D/0.25D bước) ※
	Trụ điện khúc xạ: 0D đến ± 10D (0.12D/0.25D bước) ※
	Astigmatic trục góc: 0 ° đến 180 ° (1 ° / 5 ° bước)
Đo Giác Mạc	Đường kính quang học tối thiểu: φ2.0mm
	Bán kính cong giác mạ: 5.00mm đến 10,00 mm (bước 0.01mm)
	Điện khúc xạ giác mạ: 67.50D đến 33.75D (0.12D/0.25D bước) (chỉ số khúc xạ giác mạ = 1.3375)
	Giác mạ astigmatic điện khúc xạ: 0D đến ± 10D (0.12D/0.25D bước)
	Giác mạ astigmatic góc trục: 0 ° đến 180 ° (1 ° / 5 ° bước)
PD Dài đo	20mm đến 85mm (bước 1mm)
Kết Nối Dữ Liệu	USB (nhập khẩu), RS-232C (xuất khẩu), LAN (xuất khẩu)
Kích Thước	286 ~ 326mm (W) × 445 ~ 526mm (D) × 466 ~ 615 mm (H)
Trọng Lượng	19.0kg
Nguồn Cung Cấp	100-240V AC, 50-60Hz, 75VA

Hệ thống biểu đồ

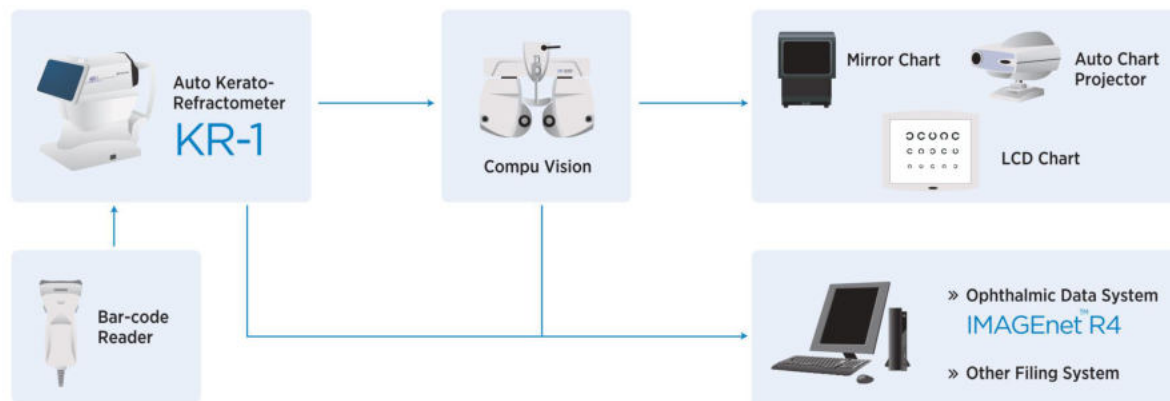

* Contact Topcon subsidiaries or dealers for system configurations.



*Subject to change in design and/or specifications without advanced notice.

IMPORTANT

In order to obtain the best results with this instrument, please be sure to review all user instructions prior to operation.



TOPCON CORPORATION



TOPCON CORPORATION



TOPCON CORPORATION
75-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8580, Japan. Phone:3-3558-2523/2522 Fax:3-3965-6898 www.topcon.co.jp

TOPCON MEDICAL SYSTEMS, INC.
111 Bauer Drive, Oakland, NJ 07436, U.S.A.
Phone:+1-201-599-5100 Fax:+1-201-599-5250 www.topconmedical.com

TOPCON CANADA INC.
110 Provencher Avenue, Boisbriand, QC J7G 1N1 CANADA
Phone:+1-450-430-7771 Fax:+1-450-430-6457 www.topcon.ca

TOPCON EUROPE MEDICAL B.V.
Essebaan 11, 2908 LJ Capelle a/d IJssel, P.O.Box145,
2900 AC Capelle a/d IJssel, THE NETHERLANDS
Phone:+31-(0)10-4585077 Fax:+31-(0)10-4585045
E-mail: medical@topcon.nl; www.topcon.eu

ITALY OFFICE
Viale dell'Industria 60, 20037 Paderno Dugnano, (Milano), ITALY
Phone:+39-02-9186671 Fax:+39-02-91081091 E-mail: topconitaly@tiscali.it; www.topcon.it

DANMARK OFFICE
Praestemarkvej 25, 4000 Roskilde, DANMARK
Phone:+45-46-327500 Fax:+45-46-327555
E-mail: topcon@topcondanmark.dk www.topcondanmark.dk

IRELAND OFFICE
Unit 276, Blanchardstown, Corporate Park 2 Ballycoolin Dublin 15, IRELAND
Phone:+353-18975900 Fax:+353-18293915 E-mail: medical@topcon.ie; www.topcon.ie

TOPCON S.A.R.L.
89, rue de Paris 92585 Clichy, FRANCE
Phone:+33-(0)1-41069494 Fax:+33-(0)1-47390251 E-mail:topcon@topcon.fr; www.topcon.fr

TOPCON DEUTSCHLAND G.m.b.H.
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 41, D-47877 Willich, GERMANY
Phone:+49-(0)2154-8850 Fax:+49-(0)2154-885177 E-mail:med@topcon.de; www.topcon.de

TOPCON SCANDINAVIA A.B.
Neogatan 2, P.O.Box 25, 43151 Mölndal, SWEDEN
Phone:+46-(0)31-7109200 Fax:+46-(0)31-7109249 E-mail:medical@topcon.se; www.topcon.se

TOPCON ESPAÑA S.A.
HEAD OFFICE
Frederic Mompou 4 Esc. A Bajos 3, 08960 Sant Just Desvern Barcelona, SPAIN
Phone:+34-93-4734057 Fax:+34-93-4733832 E-mail: medical@topcon.es; www.topcon.es

PORTUGAL OFFICE
Rua da Forte,6-6A L-0,22.2790-072 Carnaxide,PORTUGAL
Phone:+351-210-994826 Fax:+351-210-938786 www.topcon.pt

TOPCON (GREAT BRITAIN) LTD.
Topcon House Kennet Side, Bone Lane, Newbury, Berkshire RG14 5PX United Kingdom
Phone:+44-(0)1635-551120 Fax:+44-(0)1635-551170 E-mail:medical@topcon.co.uk; www.topcon.co.uk

TOPCON POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 23, 42-470 Siewierz, POLAND
Phone:+48-(0)32-6705045 Fax:+48-(0)32-6713405 www.topcon-polska.pl

TOPCON SINGAPORE MEDICAL PTE. LTD.
60 Alexandra Terrace, #08-27 The Comtech, Singapore 118502
Phone:+65-68720606 Fax:+65-67736150 E-mail:medical_sales@topcon.com.sg www.topcon.com.sg

TOPCON INSTRUMENTS (MALAYSIA) SDN.BHD.
No. D1, (Ground Floor), Jalan Excella 2, Off Jalan Ampang Putra,
Taman Ampang Hilir, 55100 Kuala Lumpur, MALAYSIA
Phone:+60-(0)3-42709866 Fax:+60-(0)3-42709766

TOPCON INSTRUMENTS (THAILAND) CO.,LTD.
77/162 Simmsathorn Tower, 37th Floor, Krungthornburi Rd., Klongtonnai,
Klongsarn, Bangkok 10600, THAILAND
Phone:+66(0)2-440-1152-7 Fax:+66-(0)2-440-1158

TOPCON CORPORATION BEIJING OFFICE
Block No.9, Kangding Street Beijing Economic-Technological Development Area,
Beijing, 100176, CHINA
Phone:+86-(0)10-6780-2799 Fax:+86-(0)10-6780-2790

TOPCON CORPORATION SHANGHAI OFFICE
14L Huamin Empire Plaza, No.726, Yan-an Xi Road,
Shanghai, 200050, CHINA
Phone:+86-(0)21-5238-7722 Fax:+86-(0)21-5237-0761

TOPCON CORPORATION BEIRUT OFFICE
P.O.Box 70-1002 Antelias, Beirut, LEBANON
Phone:+961-4-523525/523526 Fax:+961-4-521119

TOPCON CORPORATION DUBAI OFFICE
P.O.Box 293705, Office C-25 (row C-2), Dubai Airport Free Zone, Dubai,
United Arab Emirates
Phone:+971-4-299-5900 Fax:+971-4-299-5901